




## Массажная накидка ZDK Cushion 12

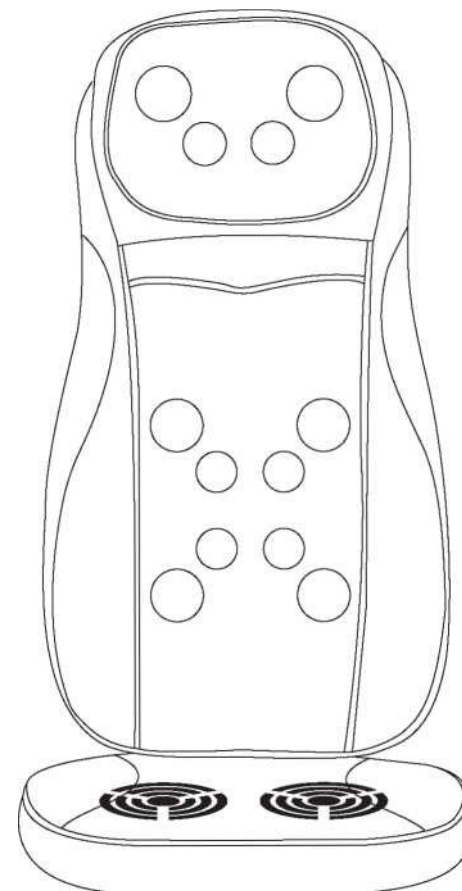

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение массажной накидки ZDK. Настоящее руководство пользователя поможет вам получить от нее наилучший эффект. Ознакомьтесь с ним и обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности, чтобы пользоваться прибором правильно. Сохраните руководство для использования в будущем.

Вся представленная информация является максимально точной, но может быть изменена без предварительного уведомления. Убедитесь в соответствии между руководством и устройством.

#### **Предупреждение**

1. Не используйте накидку с источником питания неподходящего напряжения.
2. Обязательно используйте вилку с подходящей розеткой.
3. Эксплуатируйте устройство в соответствии с руководством по эксплуатации.
4. Не используйте устройство на открытом воздухе.
5. Устройство не предназначено для лиц с физическими недостатками, сенсорными и нервными дефектами. Также накидка не предназначена для использования детьми. Эти лица могут пользоваться устройством только под надлежащим присмотром.
6. За детьми должны присматривать взрослые, чтобы дети не играли с устройством.
7. В случае повреждения кабеля электропитания во избежание опасности замена должна производиться специально подготовленным персоналом производителя из отдела технического обслуживания или из аналогичных функциональных отделов.
8. Накидка нагревается. Это может быть важным для лиц, чувствительных к теплу.

#### **Условия эксплуатации**

1. Не используйте накидку в среде с высокой влажностью, например, в ванной комнате.
2. Не используйте накидку в среде с резким изменением температуры.

#### **Технические характеристики**

Устройство: массажная накидка ZDK Cushion 12 для массажа шиацу, работающая при помощи сжатого воздуха под давлением

Модель: Cushion 12

Номинальное напряжение: 2 В

Номинальная мощность: 48 Вт

## Особенности ZDK Cushion 12

- » Разминание и массаж шиацу
- » Разминание по часовой и против часовой стрелки
- » Массажная воздушная подушка позволяет телу расслабиться
- » Устройство может использоваться в разных местах дома

## Особенности



Пульт управления



Воздушная подушка на сиденье



Массаж поясницы с использованием воздушной подушки



Защита от перегрева



Разминание




Подогрев

## Уход и техническое обслуживание

1. Плановое техническое обслуживание проводится с использованием нейтрального чистящего средства. Чистите устройство с помощью мягкой ткани, не используйте едкие чистящие средства.
2. Во время эксплуатации не нажимайте на выключатели устройства с чрезмерной силой. Не перенапрягайтесь, чтобы избежать стресса. Садитесь на устройство таким образом, чтобы ваш позвоночник находился посередине спинки накидки.
3. После использования снова поместите устройство в коробку или храните в сухом месте.
4. В случае возникновения неисправности при эксплуатации немедленно отключите электропитание, прекратите использование и передайте устройство в сервисный центр нашей компании. Не разбирайте устройство самостоятельно.
5. Массажная накидка имеет устройство защиты от перегрева. При его срабатывании отключите накидку на 30 минут.
6. В случае перегорания предохранителя обратитесь в сервисный центр.

## Массажная накидка с воздушной подушкой

### Схема устройства

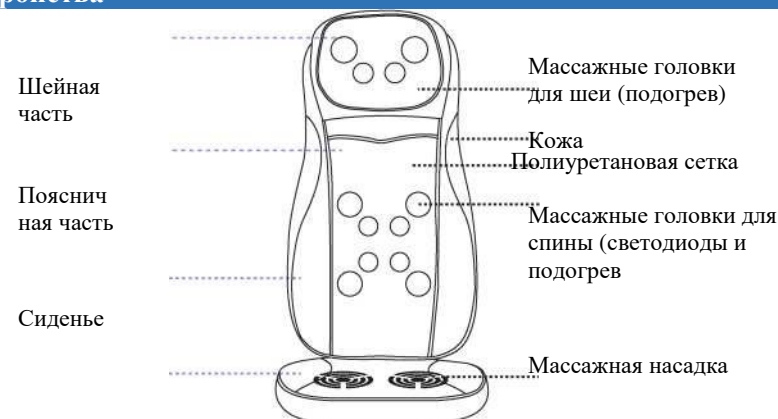

### Устранение неисправностей

Неисправность	Вероятная причина	Устранение неисправности
Устройство не работает	Электропитание не включено. Штепсельная вилка вставлена неправильно. Не включен выключатель питания.	Подключите электропитание Правильно вставьте штепсельную вилку Активируйте переключатель питания.
Внезапное отключение при эксплуатации	Использование в течение длительного времени Перегрев	Остановите устройство Отключите электропитание
Устройство работает слишком сильно или слишком слабо	1. Устройство установлено под неподходящим углом 2. Тело слишком сильно прижимается к массажной накидке или вы просто еще не привыкли	1. Отрегулируйте угол наклона устройства таким образом, чтобы интенсивность массажа была приемлемой. 2. Отрегулируйте положение своего тела таким образом, чтобы оно правильно прилегало к устройству.
Устройство издает жужжащий звук	1. Нормальный износ деталей 2. Звук работы массажной накидки 3. Использование в течение длительного времени	Нет

## Инструкции по эксплуатации

- Кнопка «Вкл/Выкл.» 

В режиме ожидания нажмите эту кнопку, загорится индикатор, и устройство автоматически будет работать в течение 20 минут. Нажмите повторно, индикатор потухнет, и устройство вернется в режим ожидания.

- Переключатель для шеи

Ручное включение/выключение разминания шеи

В местном рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы привести массажную головку для шеи в вертикальное положение.

В местном рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы переместить массажную головку для шеи в вертикальное положение.

- Местное положение

В режиме ожидания или в рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию местного разминающего массажа, соответствующий индикатор загорится или погаснет.

В местном рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы переместить массажную головку для спины в вертикальное положение.

- Массаж всей спины

В режиме ожидания или в рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж всей спины. Для остановки снова нажмите эту кнопку, соответствующий индикатор загорится или погаснет.

- Массаж верхней части спины

В режиме ожидания или в рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж верхней части спины. Для остановки снова нажмите эту кнопку, соответствующий индикатор загорится или погаснет.

- Массаж нижней части спины

В режиме ожидания или в рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж нижней части спины, для остановки снова нажмите эту кнопку, соответствующий индикатор загорится или погаснет.

- Подогрев

В режиме ожидания или в рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию нагрева массажной головки спины и шеи, соответствующий индикатор загорится или погаснет.

## Инструкции по эксплуатации

- Вибрация сиденья

В режиме ожидания или в рабочем режиме устройства нажмите эту кнопку, чтобы включить низкую, среднюю или высокую частоту вибрации и отключить функцию вибрации сиденья, соответствующий индикатор загорится или погаснет (при низкой, средней или высокой частоте вибрации индикатор будет мигать медленно, мигать быстро или не мигать соответственно. По умолчанию установлена низкая частота вибрации).

## Схема пульта управления

